

DR. WALSER  DENTAL GMBH



Matrices
Walser[®]

...de formas seguras y perfectas

La empresa

Desde 1947 la empresa Dr. Walser Dental GmbH es productora de instrumentos odontológicos, distribuidos a nivel mundial. Desde la fundación de la empresa se han presentado numerosas patentes. Entre otras cosas desarrollamos, de la práctica para la práctica, el sofisticado sistema de matrices para relleno dental, las conocidas matrices Walser® con pinzas. Experiencias prácticas y científicas fueron integradas en el perfecto sistema actual mediante el desarrollo continuo de múltiples modelos de ajuste.

El producto

Nuestro desarrollo más exitoso son las matrices Walser®. Más de 30.000 dentistas a nivel mundial trabajan con matrices WALSER®. Por ejemplo, suministramos hace más de 30 años hacia Japón.

Todas las matrices se fabrican manualmente.

Las ventajas

Las matrices de relleno Walser® han resultado una idea genial.


- 1 Se montan y desmontan en pocos segundos.
- 2 Rellenos óptimos con un solo movimiento de la mano.
- 3 Asientan firmes y seguras como un corsé.
- 4 Se adaptan automáticamente a las formas cónicas de los dientes.
- 5 El paciente puede cerrar la boca y morder.
- 6 No se necesitan ni tornillos ni fijadores.
- 7 Portarollos de algodón ideal.
- 8 De fácil esterilización y larga durabilidad.
- 9 La N° 24 se puede colocar de forma ideal sobre la presilla del ataguía.
- 10 Las bandas de matriz son muy finas: 0,05 mm.

El servicio

Informaciones técnicas y consultas por E-mail, fax o teléfono (dirección al reverso)

Ajustamos y reparamos “pinzas de matrices WALSER®” de cualquier antigüedad.

Así de fácil resulta la manipulación:

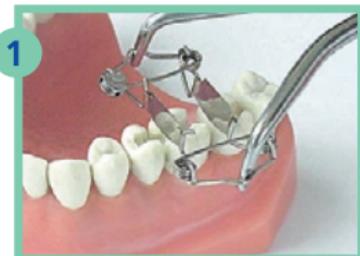

1

Tensar la matriz con la pinza Walser®, empujándola en el intersticio dental.



2

Aflojar la pinza y sacarla de la matriz.



3

La matriz se adapta automáticamente a la forma cónica del diente, asentando perfectamente - como un corsé - alrededor del diente.

(en la fig.: Forma O)



Igualmente genial y simple resulta la manipulación de todas las formas de matrices Walser®, por ejemplo:

Forma X



Forma O 24



Forma X frontal

“La matriz se coloca con rapidez, asentando firmes y seguras como un corsé.”



El surtido

“Las matrices Walser®” se confeccionan en las llamadas formas “X” y “O” respectivamente:

Forma X: Como en caso de rellenos de doble superficie e intersticio dental disponible.

Forma O: En caso de rellenos MOD y dientes individuales.

Forma XF: Para dientes frontales

Forma OF: Para dientes frontales

Forma ON: Por ejemplo, para dientes terminales, molares extra grandes y para el uso sobre la presilla del ataguía.

Formas especiales para molares de leche V



El surtido de 25



El surtido de 10

Surtido de 10 sobre bandeja de esterilización con pinza (juego de principiante).

Surtido de 18 sobre bandeja de esterilización con y sin pinza.

Surtido de 25 sobre bandeja de esterilización con y sin pinza (para usuarios experimentados).

Pinzas de matrices y **bandejas de esterilización** también de forma individual.

Las matrices Walser se suministran en 27 tamaños diferentes. Alturas de las bandas: 5 mm hasta 8 mm. Grueso: 0,05 mm.

Envases de relleno:

Paquete de 5 (5 unidades de cada número o seleccionadas a voluntad, exceptuando los N° 23 y 24. Figura del paquete de 5, ver reverso.

Paquete de 2 (2 unidades N° 23 o 24, o una N° 23 y 24).

Opiniones de la práctica:



“Siempre empleo las matrices Walser. Para mí resultan decisivos la manipulación rápida, fácil y segura y el empleo universal. Y además tienen también una gran durabilidad. Para mí representan el sistema de matrices perfecto.”

*Matthias Bacher, Wabern
(Suiza)*



“En mi consulta se emplean las matrices Walser a diario. Se montan fácil y rápidamente, adaptándose a cualquier cono de diente. Aquí alcanzo rellenos óptimos con una inversión mínima de tiempo. Mi consejo: poner los rollitos de algodón debajo de la presilla del resorte. - ¡un buen efecto secundario!”

Dr. Vera Maiwald, Berlín



“Yo empleo las matrices Walser en primera línea porque se pueden emplear de forma sencilla y universal con fácil desmontaje. Son apropiadas para casi todos los materiales de relleno y además un excelente soporte para los rollitos de algodón.”

Dr. Ulrich Grohe, Reutlingen.

Más de 30.000 dentistas a nivel mundial
confían en las matrices WALSER® originales.

DR. WALSER  DENTAL GMBH

Dr. Walser Dental GmbH
Postfach 16 48
78306 Radolfzell/ALEMANIA

Tel. +49 (0) 7732 - 33 00
Fax +49 (0) 7732 - 5 72 23
E-mail: info@walser-dental.com
www.walser-dental.com

Descripción de las matrices Walser:

Nº	Forma	Características especiales	Altura de banda	Aplicación
1	X	también para molares de leche	5,0 mm	BICUSPIDE
2	X		6,5 mm	BICUSPIDE
3	X		5,0 mm	MOLAR
4	X		6,5 mm	MOLAR
5	O	también para molares de leche	5,0 mm	BICUSPIDE-CHICO
6	O		6,5 mm	BICUSPIDE-CHICO
6c	O	un lado de banda 3 mm más largo	5/8 mm	BICUSPIDE
7	O	también para molares de leche	5,0 mm	BICUSPIDE
8	O		6,5 mm	BICUSPIDE
9	O		5,0 mm	MOLAR
10	O		6,5 mm	MOLAR
10c	O	un lado de banda 3 mm más largo	5/8 mm	MOLAR
11	XF	banda hendida hacia el final	6,5 mm	11, 12, 21, 22
12	XF	"	8,0 mm	11, 12, 21, 22
13	X	bandas extracortas/también para molar de leche	5,0 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
14	X	bandas extracortas	6,5 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
15	O	"	5,0 mm	31, 32, 41, 42
16	O	"	6,5 mm	31, 32, 41, 42
17	X	bandas extraaltas	8,0 mm	4 - 5
18	X	"	8,0 mm	6 - 8
19	O	"	8,0 mm	4 - 5
20	O	"	8,0 mm	6 - 8
21	OF	banda hendida hacia el final	8,0 mm	11, 21
22	OF	"	8,0 mm	32, 42
23	ON	bandas largas de gran abertura	5,0 mm	6 - 8
24	ON	¡ON se sujeta a través de la presilla del atagüía!	6,5 mm	5 - 9
25	O	Medida intermedia	5,0 mm	MOLAR DE LECHE V

(Forma especial para el molar de leche, muy apropiados también los Nº 1, 13, 5, 7)



Paquete de 5

Impresión del comerciante